





# Base di fissaggio

Sistema di fissaggio interno dei data logger per alte temperature per vasi, barattoli, bottiglie, boccette ed altri tipi di confezioni

## Il Sistema

La base di fissaggio può essere usata con qualsiasi data logger per alte temperature Tecnosoft, tranne che con il PasteurCyl Radio e lo SterilCyl Radio a causa delle dimensioni. Il kit è composto da una serie di perni di diversa lunghezza cui si applicano alle estremità due basi: una viene fissata alla confezione e sull'altra poggia la base del logger. Il fissaggio avviene tramite una gomma adesiva rimovibile e resistente alle alte temperature e può essere anche usata per fissare il dispositivo direttamente alla confezione.

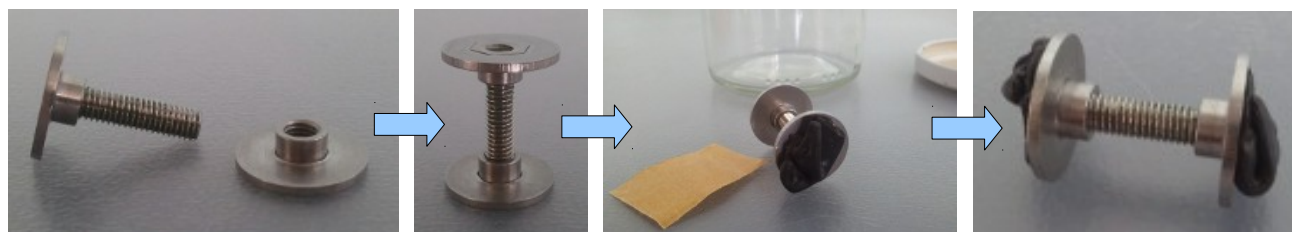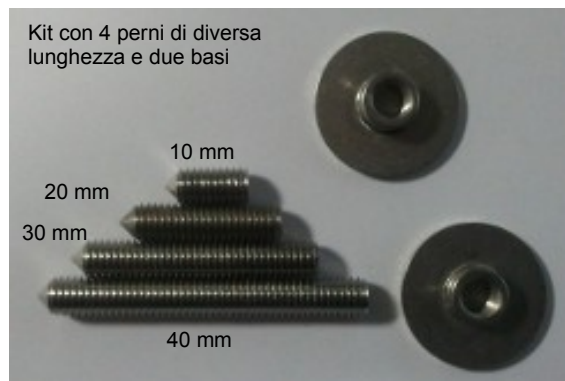

Si possono fissare tutti i tipi di data logger.



Campi di applicazione



Healthcare



Farmaceutico



Alimentari

La base può essere fissata sul fondo, sulla parete o sul tappo delle confezioni.



E' anche possibile fissare il data logger direttamente sulla parete della confezione.

